


INMU ユーザーマニュアル


製品概要

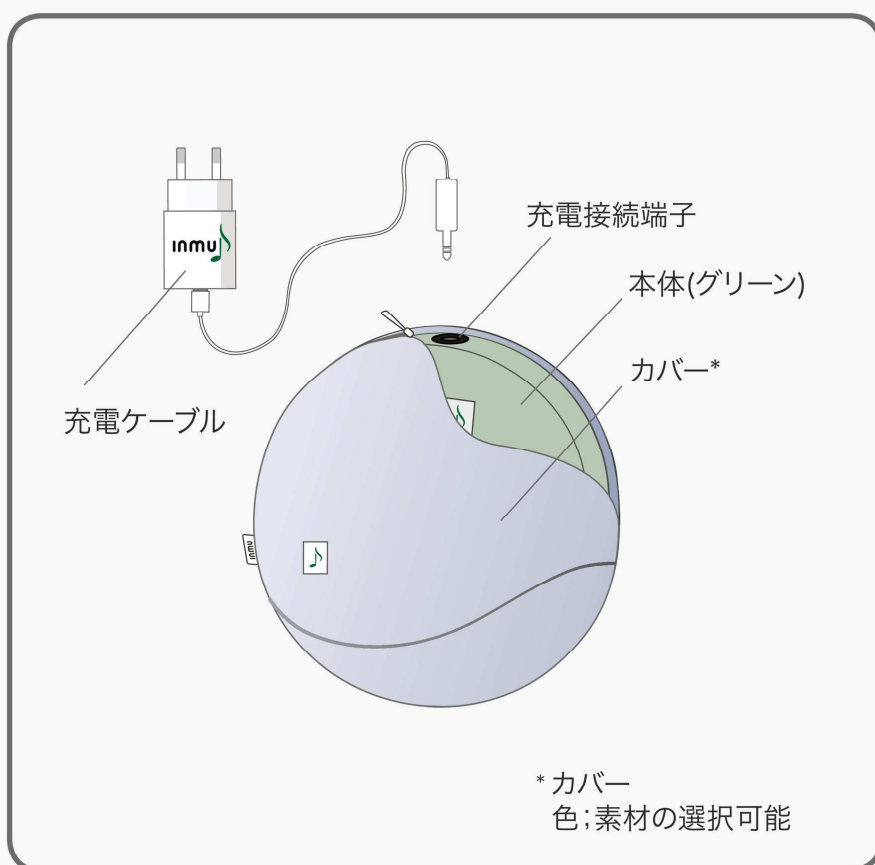

詳しくは下記ウェブサイトの動画をご覧ください。
inmu について inmutouch.jp/support
またはEメールでお問い合わせください。
info@inmutouch.jp


inmu
touch

スイッチをONにする

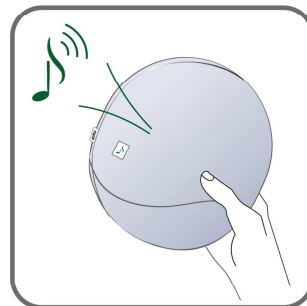


inmuは触れるだけでONの状態になり、音楽がスタートします。プラグが挿入されている場合は抜いてください。

スイッチをOFFにする

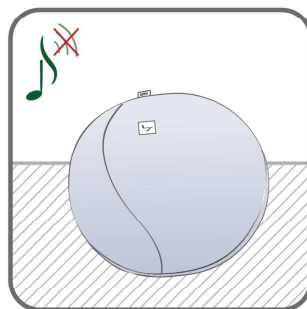


inmuは、置くと自動的に停止します。注意：ケーブルは必要ありません。

機能停止

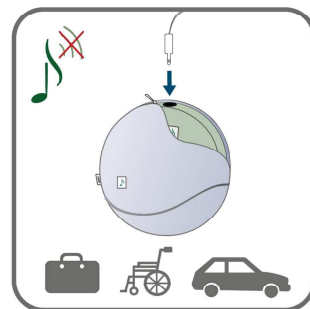


持ち運ぶときのサイレント・モード：
カバーのファスナーを開けて、ケーブルを差し込むと、inmuはサイレント・モードになります。ケーブルを外すと機能が再開します。


カバーの洗濯

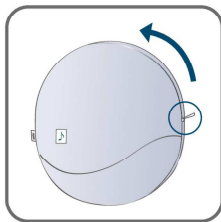

ファスナーの引手を探します。ファスナーを開き、カバーを外します。

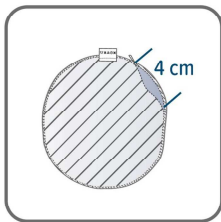

カバーを裏返します。カバーのファスナーを4cmほど残して閉めてください。カバーのファスナーの引手が完全に隠れる状態にしてください。

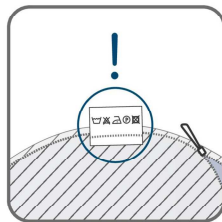


ラベルの説明に従って洗濯してください。




洗濯機の使用・手洗い可能です。


カバーの乾燥

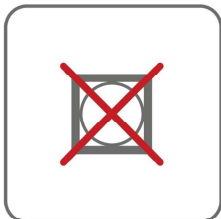


乾燥機の使用は避けてください。

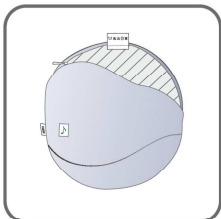

カバーを表に戻します。

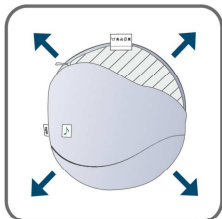


濡れているうちにカバーを伸ばして 形を整えます。

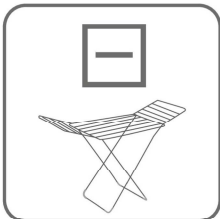


タオルの上などで自然乾燥させてください。


メンテナンス

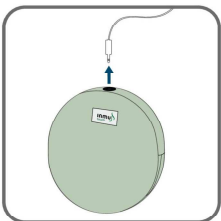


ケーブルが挿入してある場合は抜いてください。

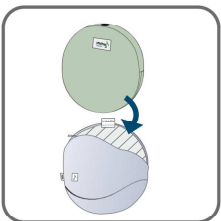

外側のカバーを被せます。

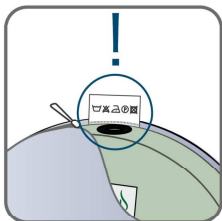


注意事項：必ず説明ラベルとプラグを揃えてください。

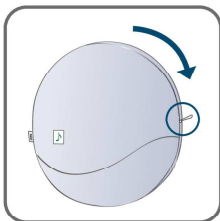


ファスナーを閉じ、引手が完全に隠れる状態にしてください。


充電

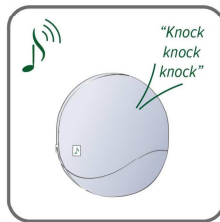


バッテリー残量が下がると「トントントン」という音で知らされます。この音がしたら充電が必要です。

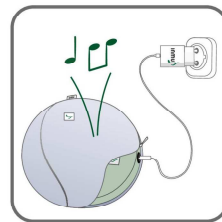

ファスナーの引手を探します。カバーのファスナーを開き、ケーブルを差し込み、チャージャーに接続します。充電が始まると信号音を発します。

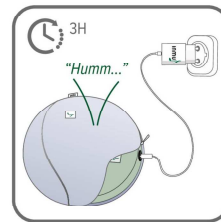


充電時間は3時間程度です。充電が完了するまで「ブーン」という音が鳴り続けます。音量でバッテリーの充電レベルがわかります。

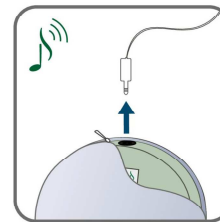


「ブーン」という音が止まったら、inmuの充電完了です。ケーブルを外し、カバーのファスナーを閉じて、引手が完全に隠れる状態にしてください。

音量* (以下の説明に従ってください。またinmutouch.com/support掲載の動画をご覧ください。)


* inmuの全モデル対応ではありません。inmutouch.comをご参照ください。

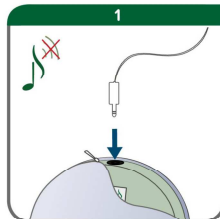


1. ミュージックをスタートさせます。ケーブルを差し込み、inmuをサイレント・モードにします。そしてすぐに・・・

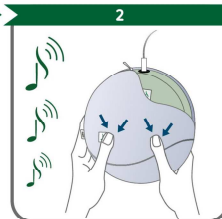

2. 両端を握って同時にしっかり押さえます。音を聞いて、望ましい音量のところで止めてください。音量は、低・中・高の3レベルです。そしてただちに・・・

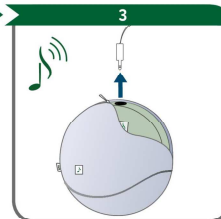

3. ケーブルを抜くと、選択した音量設定が保存されます。カバーのファスナーを閉じて、引手が完全に隠れる状態にしてください。

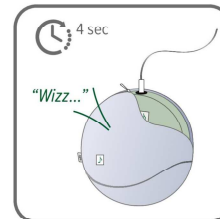

この設定は4秒間以内に行う必要があります。音量設定が保存されなかった場合、「小さな通知音」がします。その場合は、上記3ステップを繰り返してください。


メンテナンス




inmuには撥水加工が施されているため、湿った布で汚れを拭き取ることができます。



カバーと本体は、消毒用ティッシュで拭くことができます。

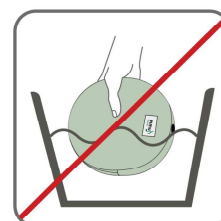

注意：inmuには完全防水加工は施されていません。

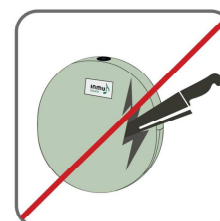

注意：inmu (本体) を鋭利な硬いものに近づけないでください。

廃棄



inmuはリチウムイオンバッテリーが使用されています。通常のご家庭ごみとして廃棄することはできません。バッテリーの廃棄に関しては、お住まいの地域のルールに従い廃棄してください。

Model name: inmu Soprano
Product name: inmuRELAX and inmuDANCE

リサイクル



inmuはリサイクル可能な素材が使われています。

詳しくは下記ウェブサイトの動画をご覧ください。inmuについて inmutouch.jp/support またはEメールでお問い合わせください。 info@inmutouch.jp

安全上の注意



- 1 inmuを分解したり、本体カバーを取り外したりしないでください。
- 2 inmuを鋭利な硬いものに近づけないでください。
- 3 火気に近づけないでください。
- 4 可燃性の液体に近づけないでください。
- 5 inmuは防水仕様ではありません。水濡れなどにご注意ください。
- 6 チャージャーとケーブルを濡らさないでください。
- 7 屋外や湿度の高い場所にinmuを放置しないでください。
- 8 気温5°C未満、45°C超の場所では使用しないでください。
- 9 気温10°C未満、45°C超の場所では充電しないでください。
- 10-12 inmuおよびバッテリーを直射日光に当てないでください。
- 13-14 充電時には必ず付属のチャージャーとケーブルを使用してください。
- 15 チャージャーを分解しないでください。
- 16 inmuに100kg以上の荷重をかけないでください。
- 17 inmuは大きな衝撃には耐えられません（高さ2m以上からの落下は避けてください）。
- 18 一般ごみとして廃棄できる製品ではありません。部品の大半は再利用可能です。

お問い合わせ

ラックヘルスケア株式会社
東京都千代田区平河町1-3-13
CIRCLES平河町3F

www.lac-hc.co.jp
Email: info@lac-hc.co.jp
Phone: 03-6261-8993

